### I.C.LERCHER



Erleben Sie das perfekte Bild.



### Gebaut für ein Ziel: Das perfekte Bild.

#### Perfekte Bilder. Ohne Kompromisse.

Mit diesem Ziel wurde die D-CAM HD S von Grund auf neu konzipiert. Die beschlagfreie HD-Optik wird mit speziellen Glaslinsen in Handarbeit gefertigt. Sie projiziert das Bild unverfälscht auf den HD-Sensor, welcher in Zusammenarbeit mit der integrierten, schattenfreien Beleuchtung farbtreue Bilder in überwältigender Brillanz aufnimmt. Über den stufenlosen Fokusring wird jeder Moment gestochen scharf auf Millionen von Pixeln abgebildet. Das Ergebnis sind detaillierte Zahn- und Gewebestrukturen an jedem Zahn, in jeder Mundhöhle.

D-CAM HD S, erschaffen für eine Aufgabe: Das perfekte Bild.

#### Kleine Vibration. Große Wirkung.


Zeigen Sie der D-CAM HD S was sie aufnehmen soll und sie macht den Rest. Egal ob Rechts- oder Linkshänder, Oberoder Unterkiefer. Wenn Sie einen der vier einstellbaren Touch-Segmente berühren, signalisiert eine kurze Vibration die Bereitschaft der Kamera. Nehmen Sie den Finger vom Segment, wird in Bruchteilen einer Sekunde die Helligkeit der LED-Beleuchtung angepassst, der hochauflösende HD-Sensor parametrisiert und der Zahn auf Millionen von Bildpunkten festgehalten. Alles was Sie davon spüren, ist eine zweite Vibration. Mit einfachen Worten: Touch. Brrrr. Shot.

#### Klick. Und los.

Die LONG-LIFE Metallkupplung ermöglicht nicht nur das schnelle Ab- und Anstecken, sondern auch den Einsatz in jedem Behandlungszimmer.



### Aluminium und Glas. Ein Duett der Perfektion.

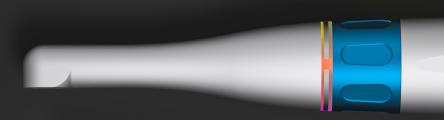

### Widerstandsfähigkeit. Ergonomie Balance. Funktion. Design.

All diese Aspekte spiegeln sich im Gehäuse der D-CAM HD S wider. Beginnend an der Spitze, schmiegt sich das präzise gefertigte Aluminiumgehäuse wie eine Haut über die aus Glas gefertigte HD-Optik. Diese langgezogene Form lässt sie selbst schwierige Stellen mühelos erreichen. Nahtlos geht die Außenkontur in den Touchbereich mit integrierter Statusanzeige und die stufenlose Fokussierung über. Den Abschluss bildet das Handstück mit abgeschrägten Seitenflächen. Diese ermöglichen eine einfache Orientierung und verhindern das ungewollte Wegrollen der D-CAM HD S.

Die ausbalancierte Konstruktion und die vielseitige Bedienung garantieren beste Ergonomie. So ist sie nicht nur für den täglichen Einsatz bestens gerüstet sondern meistert auch mühelos längere Behandlungen.

### Einzigartige Nutzer erfordern individuelle Geräte.

Wie Sie ein Bild machen, bleibt Ihnen überlassen – Möglichkeiten gibt es viele. Über das Menü wählen Sie sich einfach Ihre Lieblingsfunktionen aus und speichern sie direkt auf der Kamera. So wird die D-CAM HD S zu Ihrer D-CAM HD S. Die Einstellungen bleiben erhalten, auch wenn es neue Funktionen gibt. Dann bekommen Sie eine Mitteilung und können über das Online-Update von Verbesserungen und neuen Funktionen profitieren – auch nach dem Kauf.

# Hart im Nehmen. Leicht zu reinigen.

# Integration? Kein Problem!





#### Hygiene durch Qualität

Ein durchgängiges Gehäuse ohne Kanten und Vertiefungen ermöglicht eine Wischdesinfektion mit handelsüblichen, RKI-konformen Desinfektionsmitteln. Durch die Vermeidung von Plastikteilen und der Verwendung von hochwertigem Aluminium, ist ein langlebiger Einsatz auch bei täglich mehrfacher Reinigung garantiert.

Lästige Hygienehüllen gehören damit der Vergangenheit an. Diese sind nicht nur umständlich anzubringen und verursachen zusätzliche Kosten und Müll, sondern mindern vor allem die Bildqualität enorm.

Ein sauberes Bild – hygienisch und qualitativ!

#### Simpel. Aber vielseitig

Die simple Bedienung beginnt schon mit der Einrichtung: Standard USB-Anschluss verbinden und dank UVC-Technologie startet die automatische Erkennung und installiert die D-CAM HD S völlig selbständig.

**DCAMHD**s

Ob volle Integration in die vorhandene Praxissoftware oder einfache Anwendung, wir haben die Lösung. Über unsere smarte L-CAP Software können Sie problemlos Bilder aufnehmen, mit dem Patienten besprechen und bei Bedarf ableden. Einfach so. Soll die Kamera direkt in die Praxissoftware eingebunden werden, kommt unsere TWAIN-Anbindung zum Einsatz. Darüber lässt sich die D-CAM HDS bequem aus Ihrer Praxissoftware starten, Bilder aufnehmen, besprechen und im Anschluss zum Patienten abspeichern.

Was auch immer Sie vorhaben, wir sorgen dafür, dass die perfekten Bilder den richtigen Weg finden. Ganz einfach und ohne Umwege.



## I.C.LERCHER

Designed & Manufactured in Germany



Im Sägenloh 8 78333 Stockach

Fon +49 ( 0 ) 7771 - 914 628-80

info@iclercher-solutions.de www.icl-s.de

